

Újrendszerű leeresztőzsák sztóma irrigálásához.

A sztóma irrigálásának legfontosabb eszköze a széklet leeresztő-zsák. Erre a célra az eszközforgalmazók kisebb eltéréssel, de azonos elven működő eszközt gyártanak.

Mindegyik jellemzője, hogy egy cca. 70 – 80 cm-es tömlő egyik végén távozik a széklet, a másik végén van lehetőség a kónusz sztómába illesztésére. A harmadik nyíláson rögzül a leeresztőzsák a sztómára. **Ennek a harmadik nyílásnak a kiképzése teszi költségessé az eszközt.**

A leeresztőzsák sztómára rögzítésre két módszer van:


- ragasztással rögzül, így mindenképp egyszer használatos
- egy övvel rögzített a sztómát körül vevő karimára, vagy a kétrészes sztómazsák alaplapjára pattintható leeresztőzsák, mosogatás után többször felhasználható





Az igényes irrigáló mindennap irrigál. A leeresztőzsák ára nem teszi lehetővé, hogy egyszer-használatos eszközt használjunk.

Az ötletem a leeresztő zsák árát század részére csökkenti és lényegesen praktikusabb, higiénikusabb a használata az ismert megoldásoknál. A kétnyílású leeresztőzsákom fóliatömlőből van kialakítva. A fóliatömlő sztomára illeszkedő végén gyűrűssel "gallért" képezünk. Ebbe a gallérba akasztható be a tömlőt rögzítő derékon átvetett öv. „Beszéljenek a képek!”

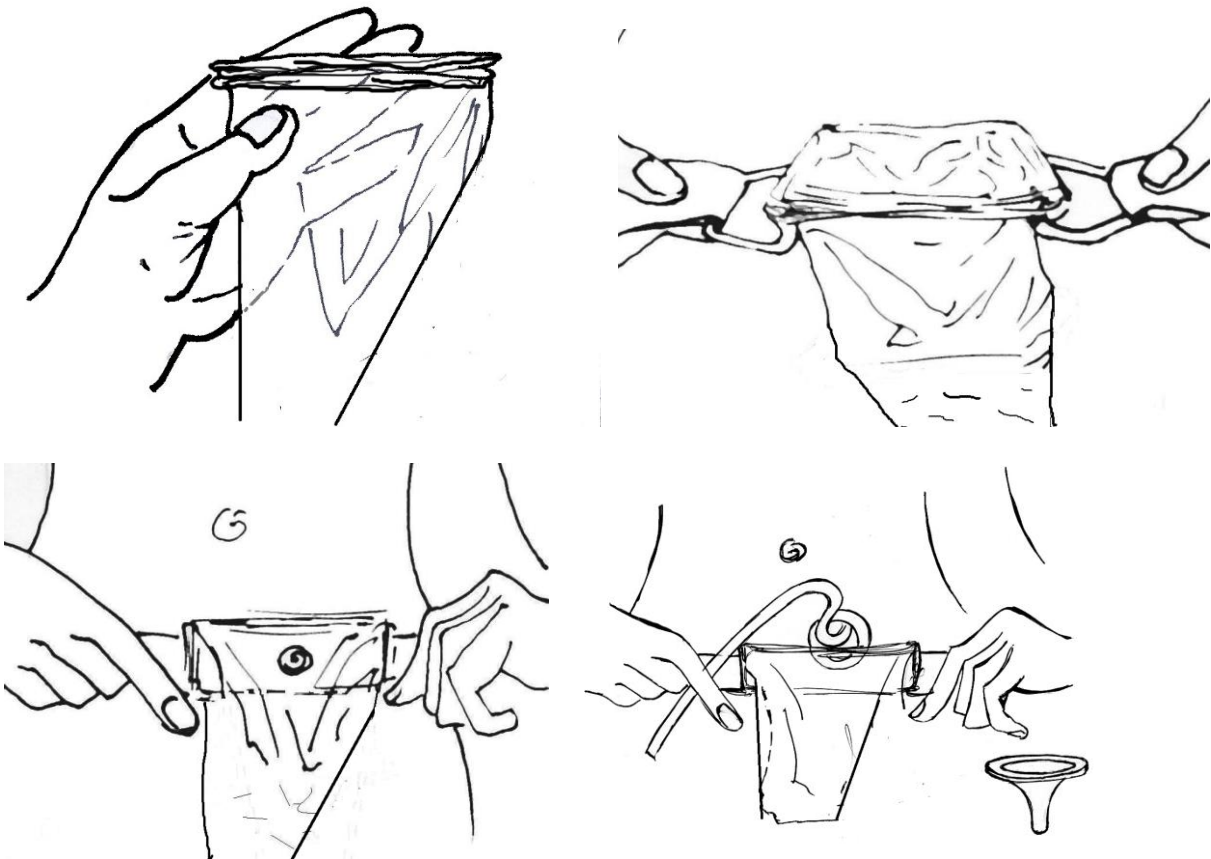



A rögzítésben rejlő lehetőség a „Harmadik világ” szegényeinek is megoldást adhat.



